



# SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ MEZIZUBNÍM KARTÁČKEM


## JAK POUŽÍVAT MEZIZUBNÍ KARTÁČEK

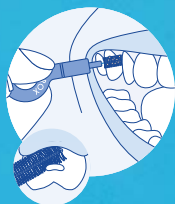

Mezizubní kartáček přiložte špičkou k mezizubnímu prostoru, šikmo k dásni. Pod správným úhlem (umožní pohyb kartáčku bez použití síly) jemně vsuňte kartáček zhruba do poloviny prostoru. Každý prostor vyžaduje jiný úhel!

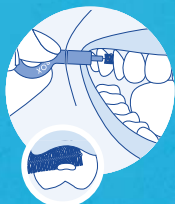

Bez posouvání kartáčku dále mezi zuby napřimte kartáček tak, aby byl kolmo k ose zubu.

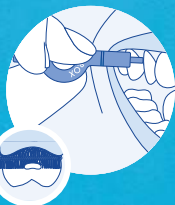

Potom kartáček pod stejným úhlem opatrně zasuňte a zase vytáhněte. Jednou denně tam a zpátky – více není třeba!

Mezizubní prostory nelze vyčistit zubním kartáčkem a většinu z nich ani zubní nití. Pouze mezizubní kartáček (správné velikosti) se dokáže uvnitř prostoru rozvinout - dosáhnout na jeho stěny - a tím ho vyčistit.



správná velikost mezizubního kartáčku



nesprávná velikost mezizubního kartáčku



dentální nit



párátka

Pokud s používáním mezizubních kartáčků začínáte, mohou vám krváčet dásně. Jedná se o normální projev zánětu dásní. Jakmile začnete mezizubní prostory pravidelně čistit, zánět ustoupí a dásně se zhojí. Přibližně do jednoho týdne by krvácení mělo ustát. Pokud neustane, obraťte se na svého zubního lékaře nebo dentální hygienistku.

S výběrem správné velikosti mezizubního kartáčku vám pomůže zubní lékař nebo dentální hygienistka.



# MEZIZUBNÍ KARTÁČKY (CPS) PRO ŠETRNÉ A ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ MEZIZUBNÍCH PROSTOR:

## CPS řady «prime»

CPS 06   CPS 07   CPS 08   CPS 09   CPS 011



## CPS řady «perio»

CPS 405   CPS 406   CPS 408   CPS 410



### Patentovaný chirurgický drát CURAL®:

jemný a pevný, nedeformuje se, s výrazně delší životností.

### Jemná a dlouhá vlákna:

účinně a šetrně odstraní plak. V mezizubním prostoru se rozvinou a dosáhnou na všechna potřebná místa.

### Životnost:

způsob uchycení drátku zabraňuje jeho zlomení a prodlužuje životnost kartáčku.


## DRŽÁKY MEZIZUBNÍCH KARTÁČKŮ:




**UHS 409,**  
rovný plastový držák,  
click systém

**UHS 475**  
úhlový ocelový držák,  
click systém

## UHS 409 držák, click systém

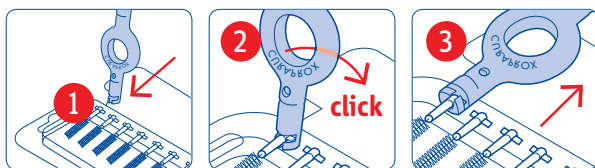

## UHS 470 držák, click systém

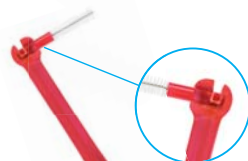

**UHS 470,**  
úhlový plastový držák,  
click systém